





PŘEDSTAVENÍ

Děkujeme, že jste si vybrali masážní zařízení LANAFORM Cell Roller.

Anticelulitidní přístroj Cell Roller Vám umožní masáž, která podpoří průtok krve, zejména v oblastech postižených celulitidou, pomerančovou kůží a uvolněnou pojivovou tkání: stehna, paže, břicho a zadek. Jeho výkonný motor poskytuje účinnou masáž squeeze-roll.

Tento komplexní pohyb umožňuje masírovat podkožní vazivo, podporovat průtok krve a lymfatický oběh. Vaše pokožka bude hladší, pevnější a celulitida bude redukována.

OBSAH

- 01 Rozbalení
- 02 Bezpečnostní opatření
- 03 Popis přístroje
- 04 Instrukce k použití
- 05 Čištění a údržba
- 06 Skladování
- 07 Rady pro likvidaci odpadu
- 08 Omezená záruka

01 ROZBALENÍ

Před použitím prosím pečlivě otevřete obal. Zkontrolujte, zda je k dispozici veškeré příslušenství a zda nebyly některé součásti poškozeny během přepravy a dodržujte pokyny k instalaci a obsluze uvedené v tomto návodu. V případě jakéhokoli poškození nebo poruchy kontaktujte prodejce nebo přímo Lanaform. V případě jakékoliv reklamace budete potřebovat model zařízení, sériové číslo, datum nákupu, vaše údaje a vaši adresu.

- 1× zařízení Cell Roller
- 1× napájení
- 1× tato uživatelská příručka

02 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

⚠ Před použitím elektrické láhve si prosím přečtete všechny instrukce, zejména tyto základní bezpečnostní instrukce.

📷 Fotografie a další vyobrazení produktu v tomto návodu a na obalu jsou co nejpresnější, ale netvrdí, že jsou dokonalou reprodukcí produktu.

Zařízení je určeno výhradně pro osobní použití, nikoli pro lékařské nebo komerční účely. Nenahrazuje lékařské ošetření. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více. Není zamýšleno používat tento přístroj lidmi, včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo lidmi s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení o způsobu použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti jej nesmí čistit a manipulovat s ním bez dozoru. Pokud je elektrický napájecí kabel zařízení poškozen, musí být zlikvidován. Pokud kabel nelze odpojit, je nutné zařízení zlikvidovat. Za žádných okolností neotevírejte nebo neopravujte zařízení; již by nebylo možné zaručit, že zařízení bude správně fungovat. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě platnosti záruky.

⚠ Varování

Použití masážního zařízení je zakázáno

- na zvířatech,
- nepoužívejte, pokud máte nějaké patologické změny nebo rány na masírované části těla (např. vyhrzlá ploténka, otevřená rána),
- pro masáže v oblasti srdce, pokud máte kardiostimulátor. U ostatních částí těla nejprve vyhledejte lékařskou pomoc,
- na kůži a oteklé nebo popálené části těla se zánětem nebo poraněním,
- při otevřených ranách, na kapilárách, křečových žilách, při akné nebo růžovce,
- herpes nebo jiná kožní onemocnění,
- během těhotenství,
- na obličeji (oči), hrtanu nebo jiné zvláště citlivé části těla,
- nepoužívejte přístroj k masáži nohou,
- když spíte,
- po požití drog nebo alkoholu (omezené smyslové vnímání),
- ve vozidle.

Před použitím tohoto masážního zařízení vyhledejte lékařskou pomoc pokud:

- trpíte závažným onemocněním nebo jestliže

jste podstoupil(a) operaci horní části těla,

- vám byl nasazen kardiostimulátor, implantáty nebo jiné doplňkové zařízení,
- jste někdy trpěli nebo v současné době trpíte krevními sraženinami, cukrovkou nebo jakoukoli jinou bolestí neznámého původu.

Zařízení je určeno pouze k použití podle tohoto návodu k použití. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

⚠ Zásah elektrickým proudem

Jako každé jiné elektrické zařízení, i toto masážní zařízení musí být používáno pečlivě a opatrně, aby se zabránilo jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem. Zařízení proto:

- používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem a při síťovém napětí uvedeném na napájecím zdroji,
- za žádných okolností nepoužívejte, pokud dojde k viditelnému poškození zařízení nebo jeho příslušenství,
- nepoužívejte během bouřky.

Pokud je zařízení vadné nebo má poruchu, okamžitě jej zastavte a odpojte ze sítě. Netahejte za napájecí kabel zařízení ani neodpojujte napájení. Nedržte a nikdy nepřenášejte zařízení za napájecí kabel. Udržujte kabely mimo dosah horkých povrchů. Kabel nezasekávejte, nepřehýbejte ani s ním nekrúťte. Nestrkejte do něj jehly ani jiné ostré předměty. Dbejte na to, aby masážní přístroj, vypínač, napájecí zdroj ani kabel nepřišly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami. Proto používejte zařízení pouze v suchých místnostech (tj. nikdy v koupelně nebo sauně). Nikdy se nepokoušejte zvednout zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě jej odpojte. Zařízení ani jeho příslušenství nepoužívejte, pokud jsou viditelně poškozené. Zabraňte otřesům zařízení a neupustěte jej.

⚠ Opravy

Opravy elektrických spotřebičů by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Neodpovídající opravy mohou představovat vážná rizika pro uživatele. Pro případné opravy

se obraťte na poprodejní servis nebo na autorizovaného prodejce.

⚠ Nebezpečí požáru

Nesprávné použití tohoto spotřebiče nebo nedodržení těchto pokynů může způsobit požár! Nikdy proto nepoužívejte masážní přístroj:

- pod přikrývkou nebo polštářem,
- v blízkosti benzínu nebo jiných vysoce hořlavých látek.

⚠ Zacházení

Po každém použití a před čištěním zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky. Nevkládejte žádné předměty do otvorů ani do žádných rotujících částí. Zajistěte, aby se pohyblivé části mohly vždy pohybovat bez překážek. Udržujte zařízení mimo dosah vysokých teplot.

03 POPIS PŘÍSTROJE, obr. 1

01 Rukojeť

02 Posuvný přepínač, 3 polohy

- 0: zastavení

- 1: nízká rychlost

- 2: vyšší rychlost

03 Masážní válečky

04 Vstup pro adaptér

05 Spojka masážního válečku

06 Napájecí adaptér

04 Instrukce k použití

Představení

Celulitida může způsobit tvorbu tukových usazenin na povrchu kůže, lokalizovaných především kolem stehen, paží a hýždí. Když je celulitida široce rozšířená, tukové buňky zvětšují svůj objem a vyvíjejí tak určitý tlak směrem nahoru, což způsobuje tuto běžnou tvorbu tukových usazenin na povrchu kůže. K prevenci nebo redukci celulitidy nabízí medicína a svět kosmetiky mnoho metod léčby, ale žádná z nich dosud nepřinesla zcela uspokojivé výsledky.

Masáž, která podporuje prokrvení, v kombinaci s pravidelným pohybem a vyváženou stravou však může vést ke zlepšení vzhledu pokožky.

Přístroj Cell Roller vám umožňuje absolvovat masáž, která podpoří průtok krve, zejména v oblastech postižených celulitidou, pomerančovou kůží a uvolněnou pojivovou tkání: nohy, paže a zadek. Výkonný motor poskytuje silnou masáž squeeze-roll. Tento komplex pohybů umožňuje masírovat podkožní pojivovou tkáň, podporovat průtok krve a lymfatický oběh.

S funkcí squeeze-roll přístroj reprodukuje působení profesionální masáže. Ergonomický design tohoto zařízení umožňuje pohodlné použití doma.

Nastavení

- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, síťová zástrčka a kabel nejsou jakkoli poškozeny.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky na masážním přístroji.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl.

Použití


Masážní přístroj nesmí být silně zatlačen do oblasti, kterou chcete masírovat. Pokud je masáž bolestivá nebo nepříjemná, zastavte nebo změňte polohu přístroje. Nevkládejte ani netlačte na žádnou část těla, zejména ne prsty mezi rotující masážní válečky.

Zapněte masážní přístroj pomocí posuvného vypínače. Masážní válečky se začnou otáčet. Můžete si vybrat mezi nízkorychlostní nebo vysokorychlostní masáží. Doporučujeme začít s nízkou rychlostí. Chcete-li zařízení vypnout, nastavte posuvný přepínač do polohy 0.

Použití na břicho a pas

Pohodlně se posadte nebo stůjte s rovnými zády. Položte Cell Roller na břicho a jemně napněte břicho. Provádějte pomalé pohyby po celém břiše a nechte zařízení působit pro každou oblast. Začněte od poloviny břicha a posouvejte se v přímé linii oběma směry. Chcete-li propracovat horní části boků, provádějte pohyby dopředu a dozadu na každé straně, jak je znázorněno na obrázku. Pohyb několikrát opakujte. Po několika

použitích můžete také zvolit vyšší intenzitu pro lepší výsledky za kratší dobu, v závislosti na vaší pleti a vašem pocitu při používání Cell Roller.

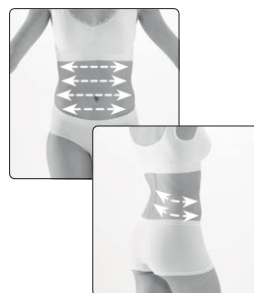

⚠ Varování

Pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte Cell Roller používat a poraďte se se svým lékařem.

Použití na nohou

Pro účinnou masáž nohou se lehce předkloňte a umístěte Cell Roller těsně nad kolena. Provádějte pomalé pohyby na přední a zadní straně steh, dokud nedosáhnete třísel a boků. Střídejte jednu nohu, pak druhou. Masáž nohou by neměla trvat déle než 5 minut.



Použití na stranách steh


Provádějte malé horizontální a vertikální pohyby na stranách steh. Nepřekračujte 5 minut na jednu oblast.



Použití na hýždě

Chcete-li tónovat hýždě, začněte používat Cell Roller na spodní části hýždí a postupujte směrem k pasu. Nechte zařízení projít přes celou oblast. Můžete také provádět horizontální pohyby směrem od středu ven.

Doporučená doba použití je 5 minut na každou oblast.

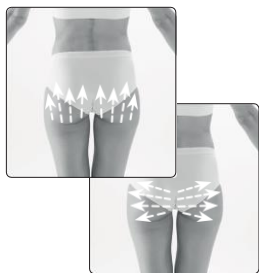

Použití na paže

Chcete-li zpevnit ruce, provádějte pohyby nahoru-dolů na přední a zadní části paží.



Čištění a údržba

⚠ Varování

- Před čištěním odpojte kabel od napájení a odpojte zařízení.
- Zařízení čistěte pouze uvedeným způsobem. Za žádných okolností se do zařízení nebo jeho příslušenství nesmí dostat tekutina.
- Masážní válečky můžete vyjmout prudkým zatažením. Válečky lze čistit měkkým kartáčkem, tekoucí vodou a trochou saponátu.
- Zařízení lze čistit měkkým vlhkým hadříkem.
- Před opětovným použitím počkejte, až bude zařízení zcela suché.

Skladování

- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu v na suchém místě. Na přístroj nic nepokládejte.

🗑 Rady týkající se likvidace odpadu

Všechny obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku jako druhotné suroviny. Karton lze vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii musíte odnést do místního třídícího a recyklačního střediska. Po ukončení používání zařízení jej zlikvidujte

způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem.

Omezená záruka

LANAFORM poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou níže popsanych okolností. Záruka LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením tohoto výrobku. Kromě toho se záruka na tento produkt LANAFORM nevztahuje na škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, nehodami, použitím neautorizovaného příslušenství, změnami provedenými na produktu nebo jinými okolnostmi jakéhokoli druhu, které jsou mimo kontrolu LANAFORM.

LANAFORM nemůže nést odpovědnost za jakýkoli druh vedlejších, nepřímých nebo specifických škod.

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po přijetí LANAFORM váš spotřebič opraví nebo vymění podle svého uvážení a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra LANAFORM. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu jinou osobou než servisním střediskem LANAFORM způsobí neplatnost této záruky.

Výrobce & Dovozce

Lanaform SA

Rue de la Légende, 55 4141 Louveigné, Belgie
www.lanaform.com

Distributor v ČR:

CM Trade Via, s.r.o.
Olomoucká 3419/7
618 00 Brno Židenice
www.cm-trade.cz

Datum poslední úpravy: 21. 10. 2024