

LANAFORM


BEAUTY

Pureskin TOTAL FACELIFT & ION GALVANIC SKIN CARE

Užívateľská príručka



SK

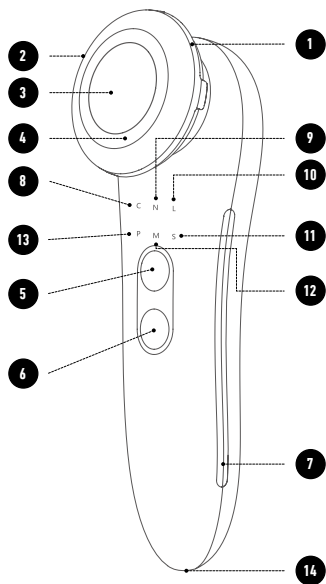

BALENIE

Ďakujeme, že ste si vybrali prístroj LANAFORM Pureskin. Vďaka svojim 6 funkciám vám Pureskin umožňuje čistenie aj starostlivosť o vašu pleť:

- čistí tvár,
- uľahčuje prenikanie kozmetických prípravkov,
- pomáha omladiť a spevniť pokožku,
- formuje obrysy tváre (tvar V),
- reguluje tvorbu kožného mazu.

Skôr ako začnete výrobok používať, prečítajte si všetky pokyny a pozornosť venujte najmä základným bezpečnostným opatreniam.

 Fotografie a ďalšie vyobrazenia produktu v tomto návode a na obale sa snažia byť čo najvernejšie, avšak nemusia dokonale zodpovedať skutočnému produktu.

OBSAH

- 1 Vybalenie
- 2 Obsah balenia
- 3 Symboly
- 4 Bezpečnostné opatrenia
- 5 Opis výrobku
- 6 Návod na použitie
- 7 Údržba a upratovanie
- 8 Technické špecifikácie
- 9 Záruka
- 10 Likvidácia odpadu

1. VYBALENIE

Pred použitím obal opatrne otvorte. Skontrolujte, či je k dispozícii všetko príslušenstvo a či počas prepravy nedošlo k poškodeniu komponentov, a postupujte podľa inšalačných a prevádzkových pokynov uvedených v tomto návode na použitie. V prípade poškodenia alebo poruchy sa obráťte priamo na predajcu alebo spoločnosť Lanaform. V prípade reklamácie budete potrebovať informácie o modeli prístroja, sériové číslo, dátum nákupu, kontaktné údaje a adresu.

2. OBSAH BALENIA

- 1 prístroj na ošetrovanie pokožky Pureskin
- 1 nabíjací kábel USB
- 1 kozmetický bavlnený upevňovací krúžok
- 1 návod na použitie
- 1 skladovací vak

3. SYMBOLY

Symbol	Opis
	Tento symbol vás varuje pred rizikom zranenia alebo ohrozenia zdravia.
	Riziko požiaru.
	Zakázané.
	Poznámka.
	Pozrite si návod na použitie
	Označenie CE. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Elektrický odpad sa musí poslať na špecializované zberné miesto na recykláciu. Len na použitie v interiéri.

4. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prístroja Pureskin si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Upozornenie

- Prístroj Pureskin používajte výlučne na ošetrovanie ľudskej tváre. Prístroj je určený výlučne na použitie opísané v tomto návode. Prístroj používajte len v súlade s návodom na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo použitím v rozpore s pokynmi.
- Tento prístroj je určený len na osobné použitie a nie je určený na komerčné použitie.

- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť vopred neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa jeho používania. Dohliadnite na to, aby sa so zariadením nehrali deti.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.
- Prístroj nesmú používať tieto osoby: pacienti so zhubnými nádormi, osoby s implantovanými lekáskymi prístrojmi, ako sú kardiostimulátory, tehotné ženy, ktoré nemôžu používať funkciu dozovu, ženy, ktoré menštruujú, osoby, ktoré sú neprijímné, trpia srdcovými chorobami a sú nadmerne unavené.
- Používanie ultrazvukovej funkcie je prísne zakázané na oči, hrtan, uši atď. Dávajte, prosím, pozor najmä na to.
- Pred použitím tohto výrobku skontrolujte, či výrobok nie je vzhľadovo poškodený a či sú svetlo pri spustení a teplota normálne.
- Pred začatím používania prístroja Pureskin si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Uchovajte si tento návod na použitie a sprístupnite ho všetkým ostatným používateľom. Ak prístroj odovzdáte ďalšej osobe, odovzdajte jej tiež tento návod.
- Ak počas používania prístroja alebo po ňom spozorujete akékoľvek zhoršenie stavu pleti, výskyt nežiaducich vedľajších účinkov alebo pretrvávajúce začervenanie, prestaňte prístroj používať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE na chronicky alebo akútne choroby (poranenú alebo zapálenú) pokožku (napr. v prípade bolestivého alebo nebolestivého zápalu, začervenania, kožných vyrážok (napr. alergie), popálenín, pomliaždenín, opuchov alebo otvorených či hojajúcich sa rán).
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu vody.

▲ Úraz elektrickým prúdom

- Rovnako ako každý elektrický prístroj, aj Pureskin sa musí používať opatrne a obozretne, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri nabíjaní tohto výrobku sa uistite, že používate nabíjačku s výstupom 5 V DC A1, ktorá je v súlade s platnými vnútroštátnymi normami, a správne pripojte zástrčku nabíjačky k sieťovej zásuvke, aby ste predišli poruche, požiaru alebo požiaru spôsobenému teplom.
- Adaptér zapájajte do zásuvky len vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je viditeľne poškodený alebo jeho príslušenstvo.
- Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak doň vnikla voda.
- Prístroj nepoužívajte počas búrky.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie prístroj okamžite vypnite. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Pri odpojení sieťového adaptéra zo zásuvky neťahajte za napájací kábel ani za prístroj.
- Nikdy nezakrývajte ani neprenášajte prístroj za napájací kábel.
- Nestláčajte kábel.
- Keďže tento výrobok má zabudovanú nabíjateľnú batériu, nevkladajte výrobok do ohňa a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou teplotou a prehriatím, pretože môže dôjsť k poruche, požiaru alebo požiaru spôsobenému teplom.
- Batéria v tomto výrobku je batéria určená na tento účel. Ak budete batériu používať dlhšie, ako je jej životnosť, môže vo vnútri batérie dôjsť k chemickej reakcii, ktorá spôsobí jej zväčšenie a deformáciu. Okrem toho sa výrobok môže deformovať pri vysokých teplotách alebo pri silných úderoch. Ak je výrobok deformovaný, nepoužívajte ho, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Sieťový adaptér uchovávajte mimo horúcich povrchov.

- Zabezpečte, aby sa napájací kábel a sieťový adaptér nedostali do kontaktu s vodou, parou alebo inými kvapalinami.
- Nikdy nezapínajte prístroj, ktorý spadol do vody.
- Okamžite odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

▲ Oprava

- Prístroj sa nesmie otvárať.
- Elektrické spotrebiče môže opravovať iba špecializovaný technik. Akákoľvek nesprávna oprava môže predstavovať pre užívateľa značné nebezpečenstvo. V prípade opravy sa obráťte na zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu. Nepokúšajte sa vykonávať údržbu prístroja, pokiaľ nie ste kvalifikovaný odborník. Údržbu vo vnútri zariadenia môžu v prípade potreby vykonávať len kvalifikovaní odborníci na údržbu.

▲ Riziko požiaru

- Nevhodné použitie alebo použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, môže viesť k nebezpečenstvu požiaru!
- Prístroj nepoužívajte v zakrytých priestoroch, napríklad pod dekou alebo vankúšmi.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.
- Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli zakryté.
- Zapnutý prístroj nikdy neodpájajte zo zásuvky. Vždy ho najprv vypnite.
- Prístroj nevystavujte vysokým teplotám.

❶ Poznámka

- Výrobok sa musí po použití vyčistiť, aby sa na ňom nehromadila masť a iné zvyšky.

5. OPIS VÝROBKU ■ 1

- 1 Kosmetický bavlnený pridržiavací krúžok
- 2 Elektróda
- 3 Ultrazvuková hlavica
- 4 Modro-červená LED dióda
- 5 Tlačidlo zapnutia/vypnutia a intenzity

- 6 Tlačidlo prepínania režimu
- 7 Elektróda
- 8 Režim „Čistenia“
- 9 Režim „Výživa“
- 10 Režim „Facelifting“
- 11 Režim „Upokojenie“
- 12 Režim „Masáž“
- 13 Režim „Fotón“
- 14 Nabíjací port

6. NÁVOD NA POUŽITIE

Nabíjanie

- 1 Pred prvým použitím výrobok nabite. Dbajte na to, aby ste nabíjačku používali v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami. Ak ho používate v zahraničí, najprv skontrolujte, či sú napätie a nabíjačka v danej krajine vhodné pre tento výrobok.
- 2 Pri nabíjaní výrobok najprv vypnite. Pripojte nabíjačku pomocou dodaného kábla USB. Vložte nabíjačku do sieťovej zásuvky a pripojte výrobok k nabíjacímu káblu USB.
- 3 Začnú blikať indikátory rôznych programov („C“ a „P“, potom „N“ a „M“ a nakoniec „L“ a „S“), čo znamená, že prebieha nabíjanie. Po dokončení nabíjania budú všetky LED diódy nepretržite svietiť. V tomto okamihu odpojte výrobok od kábla USB a odpojte nabíjačku od sieťovej zásuvky. Je to normálne, ak sú výrobok a nabíjačka mierne horúce.
- 4 Úplné nabitie výrobku pomocou nabíjačky, ktorá spĺňa požiadavky, trvá približne dve hodiny. Čas sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.

▲ Upozornenia

Napájací kábel nezasúvajte ani nevyberajte mokrými rukami (môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu).

Nepoužívajte ho na miestach, kde je prístupná voda, napríklad vo vani alebo na vlhkom mieste, aby nedošlo k poruche alebo skratu.

Musíte používať nabíjačku, ktorá spĺňa vaše požiadavky na nabíjanie.

Počas nabíjania by ste nemali byť príliš blízko k výrobku. Ak sa chystáte byť dlhší čas preč, mali by ste nabíjanie prerušiť.

Ak sa počas nabíjania vyskytnú akékoľvek anomálie, okamžite vypnite napájanie. Ak je nabíjacie vedenie poškodené alebo je uvoľnená zástrčka, okamžite prestaňte nabíjať.

Nabíjací kábel používajte a uchováajte podľa pokynov. Neohýbajte ho, nenapínajte, nekrúťte, netlačte ani ho neobtáčajte okolo nabíjačky.

Prevádzkové režimy

Prístroj Pureskin ponúka 6 dokonale sa dopĺňujúcich režimov starostlivosti o čistenie a prevenciu starnutia tváre: režim „Čistenie“, režim „Výživa“, režim „Facelifting“, režim „Upokojenie“, režim „Masáž“ a režim „Fotón“.

Všetkých 6 režimov starostlivosti o tvár využíva rôzne kombinácie technológií: technológia zvukových vibrácií (frekvencia vibrácií 20 000 Hz), technológia masáže horúcim obkladom (42 °C), technológia vyžarovania iónov +, technológia ultrazvukových vibrácií (frekvencia vibrácií 20 000 Hz), technológia elektroporácie, technológia mikroprúdovej masáže (EMS) a vyžarovanie červeného (vlnová dĺžka 623 nm) a modrého (vlnová dĺžka 465 nm) LED svetla.

Ak chcete zapnúť prístroj Pureskin, najprv stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Jednotlivé režimy starostlivosti o pleť budú postupne blikať. Ak chcete vybrať jeden zo 6 režimov podľa vlastného výberu, stlačte tlačidlo „režim“, kým sa nezobrazí príslušná LED dióda.

Každý režim má 3 stupne intenzity. Ak chcete vybrať jeden z nich, postupne stláčajte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Ak zvolíte intenzitu 1, rozsvietia sa písmená „C“ a „P“, pri intenzite 2 sa rozsvietia písmená „C“, „P“, „N“ a „M“ a pri intenzite 3 sa rozsvietia všetky písmená starostlivosti o pleť.

Ak chcete spustiť vybrané ošetrovanie, držte prístroj Pureskin pevne v ruke tak, aby sa elektródy dotýkali dvoch elektród na oboch stranách prístroja a aby sa masážna hlavica dotýkala vašej tváre.

Režim „Čistenie“ (C)

Tento režim dôkladne čistí pleť kombináciou 3 techník:

- Techniky zvukových vibrácií a teplých obkladov: tieto techniky môžu zmeniť priepustnosť bunkovej membrány a otvoriť póry v pleti na tvári.
- Technika vyžarovania iónov +: táto technika vysiela pozitívne ióny, ktoré absorbujú nečistoty obsiahnuté v pleti na tvári, čím umožňuje dôkladné vyčistenie pleti.
- V tomto režime použijete kozmetický vatový tampón a uistite sa, že je bezpečne upevnený plastovým krúžkom.

Režim „Výživa“ (N)

Tento režim umožňuje lepšie prenikanie kozmetických výrobkov, ako sú pletové vody, séra, krémy atď.

- Techniky zvukových vibrácií a používania teplého obkladu zlepšia vstrebávanie kozmetických výrobkov otvorením pórov pleti.
- Technika ultrazvukových vibrácií (frekvencia vibrácií 20 000 Hz) stimuluje regeneráciu kožných buniek.
- Technika elektroporácie zahŕňa pôsobenie elektrického poľa na bunkové membrány s cieľom zvýšiť ich priepustnosť.

Režim „Facelifting“ (L)

Tento režim spevňuje pleť a upravuje kontúry tváre (tvar písmena V). Tento režim sa odporúča najmä ako večerné ošetrovanie

- Techniky zvukovej vibrácie a použitie teplého obkladu masírujú pokožku.
- Mikroprúdová masáž (EMS) v kombinácii s ultrazvukovými vibráciami stimuluje bunkové tkanivo a pomáha spevňovať pleť. #END

Režim „Fotón“ (P)

Tento režim omladzuje pleť a reguluje tvorbu kožného mazu.

- V kombinácii s technikou zvukových vibrácií, ktorá aktivuje bunkovú stimuláciu, striedavé vyžarovanie červeného a modrého LED svetla s definovanou vlnovou dĺžkou prináša viacnásobný účinok: modré LED svetlo má upokojujúci účinok proti akné a dokáže regulovať vylučovanie kožného mazu, zatiaľ čo červené svetlo podporuje proliferáciu kolagénu a vyhladzuje jemné vrásky, takže pokožka je jasnejšia a pružnejšia.

Režim „Masáž“ (M)

Tento režim poskytuje relaxačnú a omladzujúcu masáž pleti na tvári

- Kombinácia zvukových vibrácií, teplého obkladu a červeného LED svetla pomáha pleti získať pružnejšiu a mladšiu vzhľad.

Režim „Upokojenie“ (S)

Tento režim uvoľňuje pleť a reguluje tvorbu kožného mazu.

- Kombinácia zvukových vibrácií, teplého obkladu a modrého LED svetla pomáha uvoľniť pleť a regulovať produkciu kožného mazu.

▲ Poznámka

- Každý režim má 3 úrovne intenzity. Odporúčame používať najnižšiu intenzitu a potom ju postupne zvyšovať podľa vašich návykov v starostlivosti o pleť a tolerancie.
- Prístroj má inteligentný režim rozpoznávania, čo znamená, že funguje len vtedy, keď sú elektródy v kontakte s rukou a ultrazvu-

ková hlavica sa dotýka pleti na tvári. V opačnom prípade sa výrobok vypne.

- Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Všetky LED diódy sú teraz vypnuté.
- Režim čistenia sa odporúča spúšťať každé dva až tri dni. Režim „Výživa“ môžete používať každý večer po nanosení kozmetického prípravku, ale nie dlhšie ako 2 až 3 minúty. Ostatné režimy sa môžu používať po režime „Výživa“ v závislosti od osobných návykov starostlivosti o pleť pred spaním a možno ich používať každý deň. Odporúča sa, aby každé použitie trvalo 3 až 5 minút, ale nie viac ako 8 minút.
- Na zabezpečenie normálneho fungovania výrobku je potrebné, aby ste sa pri používaní výrobku dotýkali jeho elektród.
- Ultrazvuková hlavica je vodotesná, ale telo prístroja nie je. Pri jeho čistení si prečítajte pokyny na čistenie uvedené v tomto návode. #END

7. ÚDRŽBA A UPRATOVANIE

- Keď už prístroj nepoužívate, vypnite ho a nechajte ho približne desať minút vychladnúť. Potom ho uložte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla.
- Po každom použití prístroj dôkladne vyčistite handričkou na čistenie. V prípade potreby ju môžete mierne navlhčiť. Dbajte na to, aby dovnútra nevnikla voda.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Mohli by ste tým prístroj poškodiť.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody, pretože by mohla preniknúť dovnútra a poškodiť ho. #END

8. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Product Name	Pureskin
Product reference	LA131312
Dimensions	16.6 x 5 x 5cm
Weight	± 145 gr
Battery specification	3.7V, 800mAh
Charging time	± 2 hours
Power consumption when not charging	Maximum 3W
Charger requirement	DC 5V = 1A
Standby current	Less than 20µA

ZÁRUKA

Spoločnosť LANAFORM® sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM® sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM® nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM® vplyv.

Spoločnosť LANAFORM® nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM® opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM®. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako



LIKVIDÁCIA ODPADU

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné použitie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

Pureskin

LA131312/Lot 003

**Manufacturer
& Importer**
Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com